

Jiffy™

UNIVERSAL

Ceramic Polishers, Composite Polishers

FINISH

پالیشینگ سرامیکی کامپوزیت
پالیشینگ خورشیدی کامپوزیت
پالیشینگ اوکلوزال کامپوزیت

کیت Jiffy™ Natural Universal متشکل از چرخ های اسپیرال شکل منعطفی هستند که برای آسان قرار گرفتن روی آناتومی دندان طراحی شده اند. دندانه های کشیده آنها به راحتی تا جایی که کاپ ها و پوینت ها نمی توانند بروند می رسد، و فینیش های گلس فوق العاده نرمی مانند انامل طبیعی دارد.

این کیت برای استفاده با کیت فینیشینگ یونیورسال جیفی طراحی شده تا فینیش با کیفیت و طبیعی برای ترمیم های سرامیکی و کامپوزیتی حاصل شود. چرخ های دارای ذرات الماسه ای در اینتراورال در اندازه مدیوم و دندانه های ریز موجود می باشد. فرآیند موثر دو مرحله ای این کیت به شما این امکان را می دهد تا به راحتی بیشترین فینیش طبیعی روی هر متریال سرامیکی بدست آورید. این متریال ها می تواند شامل زیرکونیا، لیتیوم دیسیکلات، و پرسلین باشد.



- این محصول طراحی شده تا فینیش های سوپرهای-گلاس را با ظاهری بسیار طبیعی بسازد
- از Jiffy™ Natural Universal برای ترمیم پالیش روی ایمپلنت های قدیمی نیز می توان استفاده کرد
- برای استفاده با سیستم فینیشینگ یونیورسال جیفی طراحی شده است
- فرآیند دو مرحله ای موثر






پالیشینگ خورشیدی کامپوزیت

- موجود در دو مدل Medium و Fine
- Medium (زرد): برای پالیش تمامی نواحی دندان به جز نزدیکی لثه
- سرعت پیشنهادی: ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ RPM
- Fine (سفید): برای پالیش نهایی تمامی نواحی دندان به جز نزدیکی لثه
- سرعت پیشنهادی: ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ RPM

پالیشینگ اوکلوزال کامپوزیت

- برای نواحی اوکلوزالی که نیازمند نفوذ برآش به نواحی خارج از دسترس است
- برآش های منعطف و در عین حال سرسخت برای ایجاد پالیش بسیار طبیعی و زیبا
- در دو سختی Medium (زرد) و Fine (سفید)

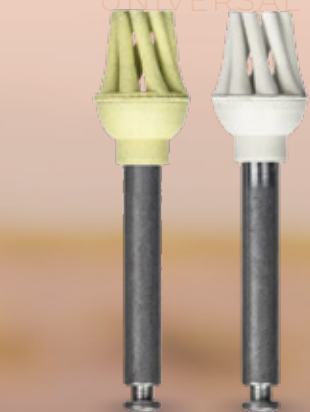

پالیشینگ خورشیدی سرامیکی

- موجود در دو مدل سختی Medium و Fine
- Medium (نارنجی تیره): برای پالیش اولیه ی تمام نواحی دندان به جز نزدیکی لثه
- Fine (نارنجی روشن): پالیش نهایی برای تمام نواحی دندان به جز نزدیکی لثه
- سرعت پیشنهادی: ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ RPM

